



Biztonsági keret WC-hez, 2 lábbal

RP770

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CE I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelte alapján (2017 április 5)

1. KÓD

RP770 Komód keret festett alumíniumból, állítható magasságú

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti S.p.A. termékcsalád MOPEDIA fürdőtermékeit vásárolta meg. Ez a használati útmutató néhány javaslatot tartalmaz a kiválasztott termék helyes használatára vonatkozóan, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet óvatosan a termék használata előtt. Ha kérdése van, tanácsért és segítségért forduljon a viszonteladóhoz. Kétség esetén javasoljuk, hogy forduljon a kereskedőhöz, aki tud segíteni és tanácsot adni Önnek.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy valamelyik alkatrészen nincs-e szállítási sérülés, és használat előtt ellenőrizze. Sérülés esetén ne használja a készüléket. További útmutatásért forduljon a forgalmazóhoz.

3. RENDELTETÉS

A Moretti fürdőszéke a fogyatékkal élő betegek segítségére szolgál a fürdőkádban



VIGYÁZAT!

- **Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben**
- **A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.**

4. EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére ezennel kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott, a fürdési segédeszközök kategóriába tartozó termékek megfelelnek a 2017/745 orvostechnikai eszközökről szóló irányelvben és annak további módosításaiban megfogalmazott vonatkozó rendelkezéseknek.

Ennek érdekében a Moretti S.p.A. saját felelősségére az alábbiakat garantálja és kijelenti:

1. A kérdéses eszközök megfelelnek a 2017/745 irányelv I. mellékletének alapvető követelményeinek, amint azt a fenti irányelv VII. melléklete előírja.
2. A nyilatkozat A mellékletében említett érintett eszközök teljes listája
3. A szóban forgó készülékek **NEM MÉRŐESZKÖZÖK**
4. A szóban forgó eszközöket **NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATRA**

5. A szóban forgó készülékek NEM STERIL csomagolásban kerülnek értékesítésre
6. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni
7. NE használja/telepítse a kérdéses eszközöket a Moretti S.p.A. által kifejezetten megjelölt célra.
8. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja a megfelelő hatóságoknak a 2017/745 irányelvnek való megfelelést igazoló dokumentációt, valamint a további módosításokat

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- NE használja ezt a terméket vagy bármely rendelkezésre álló opcionális berendezést anélkül, hogy először teljesen elolvasta és meg nem értette ezt a használati útmutatót. Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, forduljon egészségügyi szakemberhez, kereskedőhöz vagy műszaki

szakemberrel, mielőtt megpróbálná használni a berendezést, különben sérülés vagy kár keletkezhet

- A csomagolt fürdőszékét tartsa távol a hőforrásoktól
- HASZNÁLATI ÉRTÉK – a termék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg
- A sérülések elkerülése érdekében MINDIG tartsa távol kezét és ujjait a mozgó alkatrészekről
- NE engedje, hogy gyermekek játszanak a fürdőszékén vagy kezeljék a fürdőszékét

6. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

RP770

Biztonsági fogantyúk WC-hez.

2,5 cm átmérőjű eloxált alumínium cső, karfa puha szivacs. Hasznos segédeszköz az üléshez és a WC-ről való felkeléshez. Bármilyen típusú WC-hez illeszthető. Állítható magasságú lábak, csúszásgátló gumivégek.


7. ÖSSZESZERELÉS

RP770

A terméket szétszerelve szállítjuk, de szerszám nélkül könnyen összeszerelhető.

A csomagban vannak:

- Lábak gumi hegyekkel (2 db)
- Szerelőlap a keretnek a WC-n történő rögzítéséhez (1 db)
- Kartámasz keret (2 db)

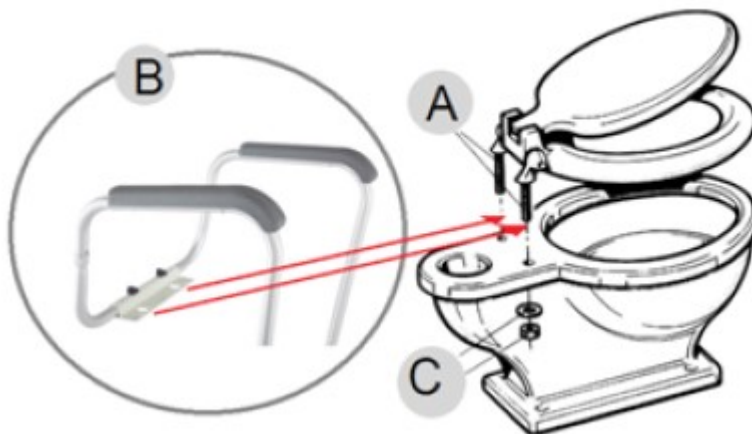

A - Csavarja ki és emelje fel a WC-ülőkét.

B – Helyezze be a lábakat a fő keretbe.

C - Csatlakoztassa a keretet a szerelőlappal a WC-hez.

- Helyezze a fogantyúkat a WC-ülőke azonos rögzítési pontjára
- Helyezze vissza a táblagépet és a csavart
- Állítsa be a lábak magasságát. Nyomja meg az ütközőt, csúsztassa a csövet a kívánt magasságba

Engedje el az ütközőt, ellenőrizze a termék stabilitását, és ellenőrizze, hogy minden láb azonos magasságban van-e

8. HASZNÁLAT ELŐTT

- Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja az emberek és tárgyak biztonságos használatát

- Ellenőrizze a készülék helyes összeszerelését

9. ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő következményekért.

- Mindig segítse a járási nehézségekkel küzdő páciens, hogy elhelyezkedjen az ülésen
- Ne használja olyan betegeknél, akik túllépik a termék keretén elhelyezett címkén feltüntetett maximális súlyt
- Kerülje a hirtelen mozdulatokat pozicionálás közben
- Legyen óvatos nedves padlón, nedves vagy csúszós felületen, mert ez megnehezítheti a beteg elhelyezését
- Ne tárolja a terméket a szabadban. Rendszeresen ellenőrizze a termék stabilitását és a megfelelő rögzítőcsavarokat és a védőgumi állapotát
- Ha kétségei vannak a termék használatával, beállításával vagy karbantartásával kapcsolatban, forduljon a kereskedőhöz

 **A maximális teherbírást semmilyen okból ne lépje túl!**

10. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

RP770

Hasznos, ha nagyobb stabilitást érhet el a WC-n való fel- és leülés során.

Ügyeljen arra, hogy ne nyomja a teljes testsúlyt a segédeszközre, mert az csak TÁMOGATÁS.

11. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

11.1 Tisztítás

A segédeszköz és a szerkezet tisztításához használjon alkoholos és semleges szappant (egyenlő arányban) vízzel elkeverve. Tisztításkor ne használjon súrolószert, savat, alkoholt, klór alapú tisztítószert, fertőtlenítőszert és acetont, mert ezek az anyagok a műanyag felületek kopását és a fémfelületek rozsdásodását okozzák.

A gyártó cég nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket a tisztítás során a termék felületét károsító anyagok vagy korrozív vegyszerek használata okoz.

11.2 Fertőtlenítés

Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon közönséges, semleges fertőtlenítőszert.

12. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

Ártalmatlanítás esetén ne használja a behelyezett edényt a kommunális hulladékhoz. Javasoljuk, hogy a fürdőszéket a megfelelő hulladékgyűjtő helyre dobja újrahasznosítás céljából.

13. MŰSZAKI JELLEMZŐK

RP770

***Méretek:**  L: 54÷62 cm  P: 45 cm  H: 66÷76 cm

 **A termék súlya:** 1,5 kg  **Max teherbírás:** 100 kg

* A méretek a teljes méretekre vonatkoznak

14. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett. A jótállás nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy módosításából eredő

károokra, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük.

A Moretti nem vállal felelősséget a személyi sérülésből vagy a helytelen telepítésből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő vagy más módon okozott károkért.

A Moretti Moretti nem vállal garanciát a termékekre a következő esetekben: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő károk (ha van), nem a Moretti által szállított alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett átalakítás, szállítási sérülés (kivéve a Moretti eredeti szállítmányát), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

15. JAVÍTÁS

14.1 Garanciális javítás

Abban az esetben, ha a Moretti termékben anyag- vagy gyártási hiba lép fel a jótállási idő alatt, a Moretti megerősíti az ügyféllel, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból.

A Moretti saját belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti a garanciális tételt egy Moretti-kereskedőnél vagy a Moretti telephelyén. A javítás munkadíját a Moretti terhelheti, ha a javításra garancia vonatkozik. A javítás vagy csere nem újítja meg vagy hosszabbítja meg a garanciát

14.2 A garancia nem terjed ki a javításra

A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye után lehet javításra visszaküldeni. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások munka- és szállítási költségei teljes mértékben a vásárlót vagy a kereskedőt terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékek javítására a termék javításának kézhezvételétől számított hat (6) hónapig terjedő garancia érvényes.

14.3 Nem hibás készülék

A vásárlót értesítjük, ha a visszaküldött termék megvizsgálása és tesztelése után a Moretti azt állítja, hogy a termék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vásárló fizeti.

16. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk.

17. MENTESÜLÉSEK

A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével és a törvény korlátain belül a Moretti nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos képviselést, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértésekre és a jogsértésekre vonatkozó nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket. interferencia. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által előírt vélelmezett jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását

vagy a fogyasztóknak szánt termékekkel kapcsolatos véletlen vagy következményes károk kizárása vagy korlátozása. Ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás bizonyos felelősségkizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül megváltozhat.



Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.