

**HU**



**HASZNÁLATI UTASÍTÁS: ELEKTROMOS  
VIZSGÁLÓ ÁGY "DELUXE"**

**USER MANUAL: ELECTRICAL  
EXAMINATION BED "Deluxe"**

**MOBIAKCARE<sup>®</sup>**  
M E D I C A L E Q U I P M E N T

**CE**

**REF: 0806421**

### **Rendeltetésszerű használat:**

A vizsgálóágy orvosi rendelőben, fizioterápiás klinikán vagy bármely más helyen a betegek diagnosztizálására és a fizioterápia rövid távú alkalmazására szolgál.

### **Általános figyelmeztetések:**

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt.

Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.

- Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtagok becsípődését és sérülését okozhatják.

A csomag tartalmaz:

1. A vizsgaágy
2. Extra párna a háttámla furatához. (ból készült termékekhez 2021. szeptember)
3. Papírmechanizmus
4. Kézi vezérlés.
5. Lábpedál

### **Használat előtt:**

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e a termék biztonságos használatának garantálása érdekében. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ügyeljen a gombok és csavarok reteszelésére
4. Győződjön meg arról, hogy a padlófelület, amely a terméket alátámasztja, sík.
5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.

Használat közben:

Kerülje el, hogy a termék krémekkel és masszázsolajokkal érintkezzen, mindig helyezzen ágytakarót vagy egyéb védelmet az ágymatrac és a páciens közé.

Minden egyes páciens után cserélje ki ezt a huzatot vagy más védőburkolatot, amit használt, és a következő kezelés előtt tegyen fel egy újat.

### **Karbantartás és tisztítás:**

- Puha ronggyal minden használat után tisztítsa meg a termék felületét.
- A szennyeződést, olajat vagy törmeléket el kell távolítani a termék felületéről.
- Csak rongyot és enyhe szappant használjon a tisztítást igénylő felületeken.
- Ezután használjon tiszta ruhát, és szárítsa meg alaposan a termék használata előtt. Ne hagyja nedvesen a terméket.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszer
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.



### **VIGYÁZAT (!):**

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIAKS.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- MOBIAKS.A fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa
- A termékek méretei  $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.



### **Környezetvédelem:**

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy az már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.
- 4) Az elektromos termékek építőanyagok miatt, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket, környezeti és egészségi veszélyeket is okozhatnak.

Megfelelőségi nyilatkozat:


Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

## **MŰSZAKI JELLEMZŐK**

<b>0806421</b>	
<b>ELEKTROMOS VIZSGÁLÓÁGY</b>	
<b>Keret</b>	Acél
<b>Kárpit színe</b>	Fekete
<b>Csomagolás méretei (HxSzxH)</b>	197,5 x 71,5 x 25 cm
<b>Magasság a padlótól</b>	56-93,5 cm
<b>Felületi méret (LxW)</b>	191 x 70 cm
<b>Fejtámla méretei (LxW)</b>	63 x 70 cm
<b>Fejtámla dőlésszöge</b>	0° és 63° között
<b>Max. terhelés</b>	200 Kg
<b>Termék súlya</b>	56,5 Kg
<b>• Hidraulikus fejtámla emelés</b> <b>• Távirányítóval vagy lábpedállal vezérelt magasságállítás</b> <b>• A motor teljesítménye 50 watt</b>	



## Szerelési útmutató

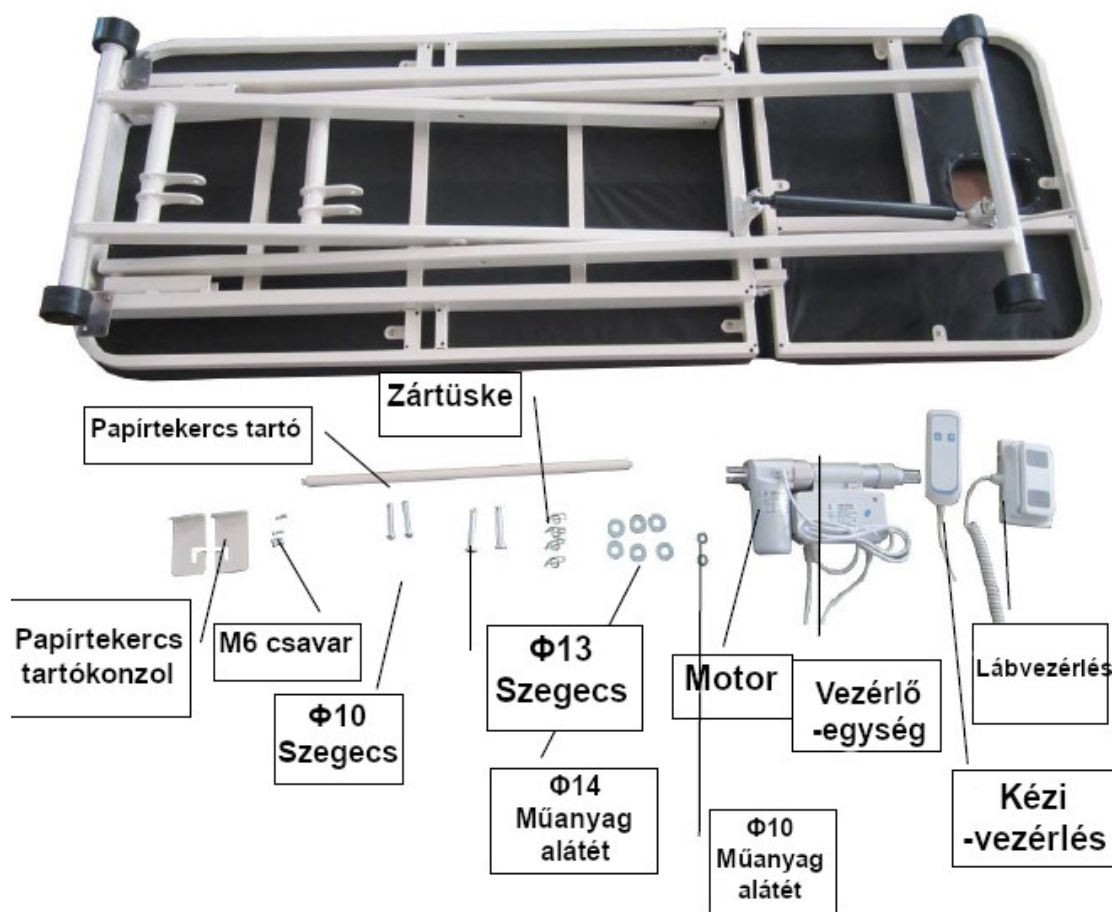

MBK KÓD	ALKATRÉSZEK
0810624	Emelőmotor
0810625	Kézi vezérlő
0810626	Lábszabályozó
0810627	Vezérlődoboz
0810628	Gázrugó
0810629	Papírtekercs-mechanizmus
0810636	Belső fejpárna

1. Az emelőkeret felszerelése: Emelje fel az emelőkeretet a furatokhoz illeszkedően, vezesse át a  $\phi 13$  szegecset  $\phi 14$  műanyag alátéttel és rögzítőcsappal a 2. ábra szerint



#3. Ábra




Zártüske

$\Phi 14$   
Műanyag  
alátét

$\Phi 10$  Műanyag alátét

Zártüske

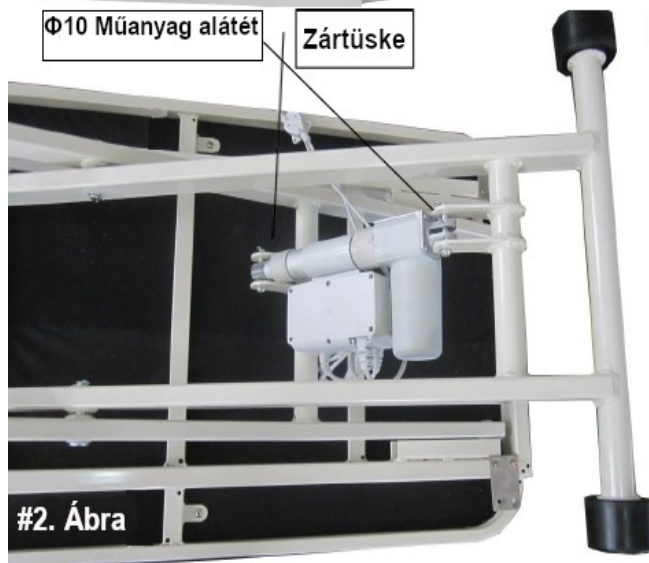

#2. Ábra

2. A motor beszerelése:  
Illessze a motor  
beépítési furatát a  
motoralap  
rögzítőnyílásához,  
vezesse át a  $\phi 10$   
szegecset  $\phi 10$   
műanyag alátéttel és  
rögzítőcsappal a 3.  
ábra szerint.



3. A papírtekeres-tartó felszerelése  
 3.1 Illessze a tartó tartókonzolán lévő furatot az ágykereten lévő csavarlyukhoz, húzza meg M6 csavarral a 4. ábra szerint.

3.2 Fordítsa meg az egész ágyat, és helyezze be a papírtekeres-tartót az 5. ábra szerint.



4. Működés a kézi és lábvezérléshez  
 Először győződjön meg arról, hogy a tápkábel csatlakoztatva van, nyomja meg a kézi vezérlő gombját vagy lépjen a lábkapcsolóra a teljes ágymagasság beállításához, majd engedje el a vezérlőgombot a kívánt pozícióig. Lásd #6.



#6. ábra



Kézi vezérlő

Láb vezérlő

#### 5. A háttámla megdöntése a gázrugóval

A háttámla emelése: Egyik kezével húzza fel a fogantyút, a másik kezével pedig emelje fel a háttámlát a kívánt szögbe. Engedje el a fogantyút, és a hátsó rész a helyére rögzül.

A háttámla leengedése: Egyik kezével húzza fel a fogantyút, a másik kezével nyomja le a háttámlát a kívánt szögben. A háttámla a helyére rögzül. Lásd a 7. ábrát.



**7. ábra**

**Garancia:**

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.



















A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat a részeket, amelyek használat közben elhasználódhatnak, például a matrac kárpitját vagy az idő múlásával.

A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben) okozta károkra vagy hibákra.

**ESEMÉNY JELENTÉS:**

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

A címkére, a főkartonra és/vagy a felhasználói kézikönyvre nyomtatott szimbólumok leírása

	ORVOSI ESZKÖZ		CE JELÖLÉS
	GYÁRTÓ		GYÁRTÁSI DÁTUM
	TERMÉKSZÁM		OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	SOROZATSZÁM		NE HASZNÁLJA, HA CSOMAGOLÁS SÉRÜLT
	TÉTELSZÁM		HELYESEN FELFELÉ
	EGYEDI ESZKÖZ AZONOSÍTÓ		NAPFÉNYTŐL TÁVOL TARTANDÓ
	TARTSA SZÁRAZON		RAKODÁSI MAGASSÁG
	ÓVATOSAN KELL KEZELNI		TÖRÉKENY
	CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA		AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV