



Irrigátor szett 28000 használati utasítás

Irrigator-Becher, 1 Liter

Can, 1 liter, graduated

+ 3-tlg. Irrigator-Garnitur

Enema Fitting Set

+ Schlauch

Tube



Rendeltetészerű használat: A beöntési/öntözőkészlet egy orvosi eszköz, és az orvosi bélrendszer kiegészítőjeként szolgál. beöntés, pl. székrekedésre és a böjt-diéták támogatására. Öntözőgépek is használhatók hüvelyöblítés. Az öntözést csak orvosi rendelés / konzultáció után szabad elvégezni.

Jelzés: Bélműködési és ürülési zavarok, széklet inkontinencia, fokozott kiválasztás, székrekedés; bakteriális hüvelyi fertőzések

Ellenjavallat: Akut (gyulladásos) bélbetegségek, bélműtét utáni állapot, heveny divertikulitisz ill hasonló, egyéb ellenjavallatok, amelyeket a kezelőorvos határoz meg; elégtelen fizikai vagy mentális képességeit használni.

Tétel leírása / verziók: A beöntés/öntözőkészlet egy beöntés csészéből, egy tömlőből és a hozzá tartozó tartozékokból (anya cső, beöntéscső és csap). A kiegészítők bél- és hüvelyöblítésekhez használhatók (lásd a pályázatot). Felhasználás, használat gyakorisága és szükség esetén a felhasználandó öblítő oldatok kötelezően előzetesen tisztázni kell a kezelőorvossal. A használati utasítás csak felhatalmazott, képzett szakember végezheti. A készülék háztartási használatra készült használat során csak ép, sértetlen bőrrel/nyálkahártyával érintkezhet és betegeknél nem szabad alkalmazni. A fent említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetészerű. Az ebből eredő károkért a SUNDÓ GmbH nem vállal felelősséget, a kockázatot kizárólag a cég viseli a felhasználó. A termékkel kapcsolatban minden súlyos eseményt jelenteni kell haladéktalanul a gyártóhoz vagy az illetékes hatósághoz.

Használat/karbantartás előtt: Mindenekelőtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást, és őrizze meg a csomagolással együtt a termék élettartamának végéig. Kérjük, az első használat előtt és minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sértetlen. Sérülés vagy kopás jelei esetén az Irrigator szettet nem szabad (többet) használni. A betartása mellett további karbantartás nem szükséges biztonsági utasítások.

Alkalmazás:

- ▶ Az első használat előtt minden alkatrészt alaposan meg kell tisztítani, a tartozékokat (1-3) fel kell főzni 5 perccel minden használat előtt.
- ▶ Tisztítás után csavarja fel a tömlőoldalt a menettel az öntözőhöz.
- ▶ Ezután a csapot (3 jelzés) be kell helyezni a tömlő (4 jelzés) másik oldalába, és el kell zárni.
- ▶ Anális öblítéshez a beöntés cső (2 jelzés) vagy hüvelyöblítés esetén a diócső (1 jelzés) rá kell csavarni a csapra.
- ▶ Ezt követően a testmeleg folyadék a megemelt folyadéktartályba (5 jelzés) tölthető az öntözőből.
- ▶ A tömlő légtelenítése után kezdődhet a beöntés/öblítés. Célszerű kicsivel kezdeni mennyiségek először. Alkalmazástól függően a folyadékkivezetés t-vel szabályozható a csaptelep.

Tisztítás és fertőtlenítés:


- ▶ Használat után az irrigátort szét kell szerelni és meleg szappanos vízzel meg kell tisztítani, a végdarabokat minden használat előtt 5 percig főzzük. Fontos: Fertőtlenítőszer használatakor be kell tartani a gyártó használati utasítását. Öblítse le az összes komponenst bő vízzel (fertőtlenítés után is, hogy eltávolítsa a fertőtlenítőszer maradványokat teljesen), és jól szellőző helyen hagyjuk

teljesen megszáradni. A csésze autoklávozható 130 °C-ig. Tisztítás után a tömlő egyik végét a tervezett megközelítésbe helyezzük öntözőcsésze.

Biztonsági utasítások:

- ▶ Az öntözést mindig előzetesen meg kell beszélni a kezelőorvossal.
- ▶ Az öblítőfolyadéknak testhőmérsékletűnek kell lennie.
 - ▶ Minden használat előtt forralja fel a tartozékokat 5 percig vízben
- ▶ Ha fájdalom jelentkezik, azonnal állítsa le a beöntést és forduljon orvoshoz.
- ▶ Kezdje kis mennyiségekkel, és lassan nyissa ki a csapot.
- ▶ A fertőtlenítés után alaposan öblítse le bő vízzel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden szennyeződés megmaradt eltávolítjuk a fertőtlenítőből.
- ▶ Az irrigátort csak teljesen száraz állapotban tárolja. Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a beöntés.

Garancia: A jogi garanciális igények szerint. Kizárva a garanciából: Nem megfelelő károk használat, normál kopás, valamint olyan hibák, amelyek értékét csak jelentéktelenül befolyásolják, ill a készülék használhatósága. Műszaki változtatások és tartozékok, valamint nem megfelelő karbantartás érvényteleníti a garanciát és általában a termékefelelősséget. Fenntartjuk a jogot a változtatásokra a műszaki fejlesztés érdekében.

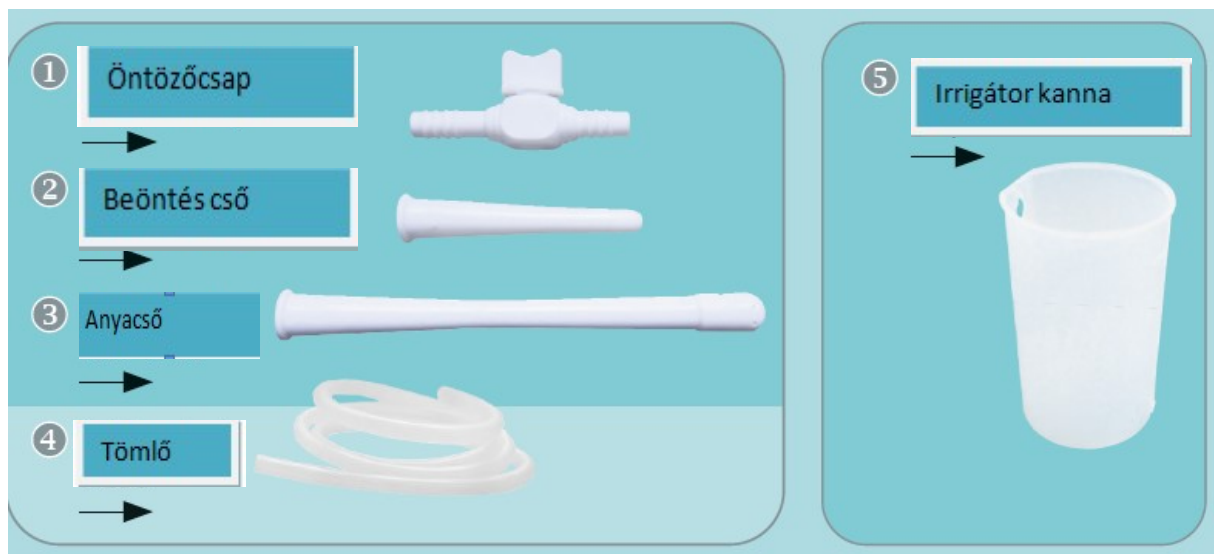

Irrigátor szett
Anyaga: PVC pohár, HDPE tartozékok, érintse meg az LDPE gombot
Kapacitása: 1L
Tömlő: PVC (med. minőségű) hossza kb. 125 cm, Ø 7 x 10,5 mm
Tárolás: 20°C és 50°C között normál hőmérsékleten Eredeti csomagolásban tárolt állapot, védve a közvetlen napfénytől és hőtől
Élettartama: 5év



Produkt und Verpackung sind
gemäß den vor Ort geltenden
Bestimmungen zu entsorgen

*Product and packaging must
be disposed of in accordance
with local regulations*

28.000V1 021



Sundo Homecare GmbH
Bahnhofstraße 13
DE-30916 Isernhagen
www.sundo-homecare.de

sundo
HOMECARE