



## Kézhosszabbító SUNDO 61 cm SD 26024, Kézhosszabbító SUNDO 76 cm SD 26030 és Kézhosszabbító SUNDO 81 cm SD 26032 használati utasítás

Art.-Nr. / Item No. 26 024 (61 cm)

Art.-Nr. / Item No. 26 030 (76 cm)

Art.-Nr. / Item No. 26 032 (81 cm)

Art.-Nr. / Item No. 26 035 (90 cm)



**Használat:** A Reacher »SUNDO« megkönnyíti a könnyű tárgyak felvételét és elrakását korlátozott kéz- vagy ujjfunkcióval. Emellett a mozgásukban korlátozott személyek támogatást kapnak tárgyak felvételekor, mivel a hajlítás vagy nyújtás elmarad (pl. posztoperatíván is csípőműtét után).


**Jelzés:** Tárgyak emelésének, tartásának és mozgatásának károsodása a felső végtag és/vagy törzs működésének károsodása esetén (pl. ízületi betegségek, neurológiai betegségek, sérülések következményei, fejlődési rendellenességek)

**Ellenjavallat:** elégtelen fizikai vagy szellemi kapacitás a segédeszköz használatához.

**Verziók:** Különböző modellek vagy méretek (lásd műszaki adatok), használati utasítás, tesztelés és a megfelelő kiválasztása az elérést felhatalmazott, képzett szakemberekkel együtt kell elvégezni. A terméket háztartási használatra tervezték, csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet. Bármilyen más felhasználás, mint a fent említettek nem célja. A gyártó vagy a Sundo GmbH nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. A termékkel kapcsolatos súlyos események esetén kérjük, értesítse a gyártó vagy az illetékes forgalmazót.

**Leírás:** A Reacher »SUNDO« egy jól kiegyensúlyozott, robusztus termék. Műanyag fogantyúval rendelkezik (1 jelzés), amely zökkenőmentes működést tesz lehetővé. A kényelmes méretű, kinyomó markolat mechanizmussal ellátott pisztoly alakú markolat többet is használható ujjak egyidejűleg könnyű és biztonságos. Ez jelentősen csökkenti az erőfeszítést. Beépített mágnes (2 jelzés) a karomnál lehetővé teszi kisebb fémtárgyak emelését, az integrált kampó (3 jelzés) megkönnyíti a

tárgyak felvételét. A markoló karom az gumírozott (4 jelzés) az egyik oldalon , a másik oldalon karcolt (5 jelzés) és ezért nem csúszik.

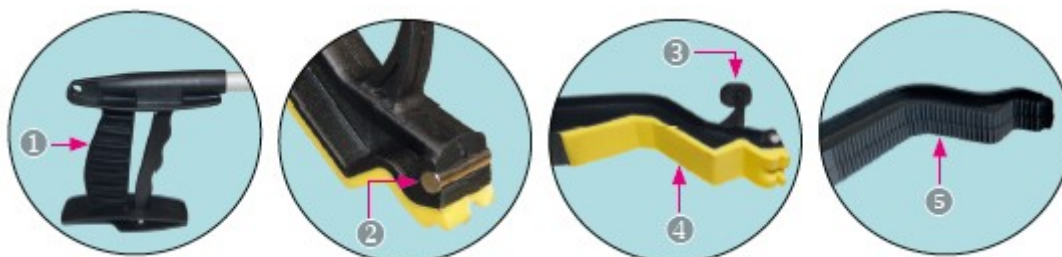

Az első használat előtt: Először olvassa el teljes egészében a használati utasítást, és őrizze meg a termék élettartamának végéig. Kérjük, ellenőrizze, ha a termék az első és minden használat előtt vizuális ellenőrzéssel sértetlen. Sérülés vagy kopás jelei esetén a toló fogantyút nem szabad (többet) használni.

Fertőtlenítés/tisztítás:

- ▶ Tisztításkor ne használjon éles, súroló hatású tárgyakat vagy tisztítószeret.
  - ▶ Minden krómozott fém alkatrészt a legjobb, ha nedves ronggyal tisztítsa meg enyhe háztartási tisztítószerrel.
  - ▶ A műanyag elemek tisztítását célszerű nedves ruhával, tisztítószer-adalékok nélkül. A műanyag felületek ápolásához speciálisan műanyag megfelelő terméket kell használni.
  - ▶ Az elérhető kereskedelmi forgalomban kapható, klórmentes fertőtlenítőszerrel lehet fertőtleníteni.
- Fontos: Fertőtlenítőszer használatakor be kell tartani a gyártó használati utasítását.



**Műszaki adatok:**

Anyaga	Alumínium, műanyag
Hossza	26 024: 61 cm 26 030: 76 cm 26 032: 81 cm 26 035: 90 cm
Karom nyílás szélessége	9,5 cm
Súly	26 024: 150 g 26 030: 190 g 26 032: 200 g 26 035: 215 g
Max. terhelhetősége	kb 3 kg

Egyik kezével tartsa az elérőt a fogantyún. Hozzáférréssel a karom van zárva, a fogantyú meglazításával a karmot újra nyílik.



#### **Biztonsági utasítások:**

- ▶ Ismerkedjen meg az elérő funkciójával és gyakorolja a megfelelő kezelést.
- ▶ A megfogott tárgyak tömege nem haladhatja meg a 3 kg-ot.
- ▶ Ne fogjon forró vagy égő tárgyakat, például gyertyát, cigarettát stb.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a beépített mágnes elektronikus berendezésektől távol legyen, ezeket károsíthatja a mágneses tér.

**Garancia:** A jogi garanciális igények szerint. A jótállás nem vonatkozik a nem megfelelő sérülésekre használat, normál kopás vagy használat, valamint olyan hibák, amelyek csak a készülék értékét vagy használhatóságát befolyásolják jelentéktelenül. Műszaki változtatások, átalakítások és bővítések és nem megfelelő karbantartás A munkavégzés a garancia és a termékszavatossági kötelezettség lejáráshoz vezet. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokat fenntartjuk magunknak.

---

 Sundo Homecare GmbH, [www.sundo-homecare.de](http://www.sundo-homecare.de)  
Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen

 Mingguang Longway Medical Technology Co. Ltd., No. 59 Lingji Rd.,  
Mingguang City, Anhui, China 239400

 Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10, 2595 AA, The Hague, Netherlands

WGA06-0121

**sundo**  
HOMECARE

---