

Használati utasítás

PRINCE transport kerekesszék

A lábtartó beállítása:

A lábtartó megfelelő beállítása fontos a kerekesszék kényelmes használatához. A lábtartó úgy lett tervezve, hogy a tartócső végén elhelyezett csavar meglazítását követően tetszőleges hosszra beállítható. Ezzel kiválasztható a megfelelő hosszú lábtartó.

A kerekesszék összecsuksukása:

A kerekesszék egyszerűen összecsuksukható. Összecsuksukás előtt a lábtartók álljanak menetirányba, valamint a műanyag talptámaszok legyenek felhajtva. Az ülőlap két oldalán elhelyezett fogantyút húzza felfelé és a kerekesszék összecsuksodik.



Háttámla használata:

A háttámla félbe hajtható, amely a kis helyen való tárolhatóság érdekében került kialakítása. Az összecsuksukáshoz nyomja meg a képen látható módon a nagyujjával a zárszerkezetenél elhelyezett kallantyút, a másik kezével hajtsa le a toló kart. Mindkét oldalon végezze el a műveletet. A háttámla kinyitásához fogja meg mindkét tolókart és emelje fel egyszerre. A zárszerkezet automatikusan bezáródik. FIGYELEM! A kerekesszék elejének megemeléséhez ne gyakoroljon nyomást a tolókarra, mert a zárszerkezet meghibásodhat. Ehhez a lábemelő adaptert használja.

A kerekesszék szállítása:

A kerekesszék szállításához először csukja össze a terméket, majd hajtsa félbe - a fent leírtak szerint - a háttámlát. Et követően távolítsa el a lábtartókat úgy, hogy húzza fel a lábtartót rögzítő kart és vegye le a lábtartókat.

A lábemelő adapter használata:


Akadályhoz, vagy járdaszegélyhez érkeve a segítő személy a lábemelő adapterekre nyomást gyakorolva megemelheti az első kerekeket. A járdaszegélyhez tolja a kerekesszék az első kerekekkel előre, majd nyomja le a segítő személy az adaptert a lábával. Ezzel megemelkedik az első kerék. Tolókart előre nyomva könnyedén áthaladhat az akadályon. FIGYELEM! A kerekesszék elejének megemeléséhez ne gyakoroljon nyomást a tolókarra, mert a zárszerkezet meghibásodhat. Ehhez a lábemelő adaptert használja.

A biztonsági öv használata:

A biztonsági öv rögzíti a benne ülő személyt a normál használat alatt. Nem helyettesíti a mozgó járművön történő utazáskor a biztonsági övet. A kerekesszék nem alkalmas mozgó járművön való használatra!

A biztonsági övet minden használóhoz be kell állítani. Az öv hosszát a csatokkal lehet állítani. A bekacsolást pedig a közepén elhelyezett csatokkal lehet megtenni. Kioldáshoz nyomja meg a csat gombját és húzza ki a csat másik felét.

A használat közben annyira legyen szoros az öv, hogy a rögzített személy számára kellemetlen érzést ne okozzon. Minden használatkor ellenőrizze, hogy az öv szorossága megfelelő-e. Az öv a nyakra kerülve fulladást okozhat, amennyiben a kerekesszékes személy kicsúszik az ülésből. Ezért a használat alatt a segítőnek figyelnie kell a kerekesszékes személy megfelelő helyzetét. Az öv mérete nem alkalmas minden méretű személynek. Amennyiben ilyet tapasztal, akkor használjon más gyártmányú szakszerű segédeszközt a kerekesszékes személy rögzítésére.

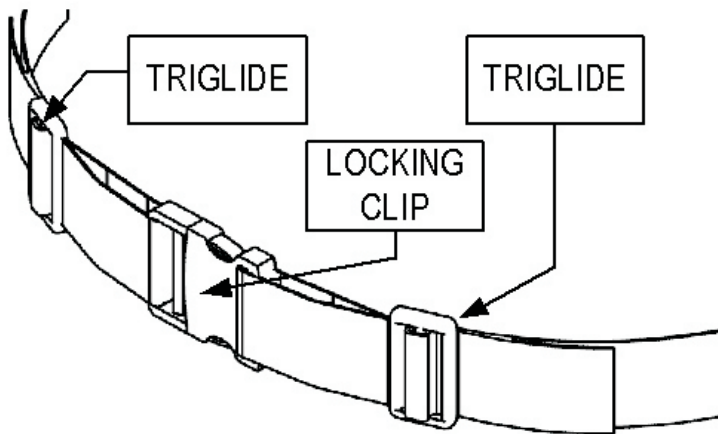

Tanácsok használatra:

- a kerekesszék csak kísérő személlyel történő beteg mozgatásra alkalmas
- a kerekesszéken elhelyezett fék kizárólag parkoló fékezésre alkalmas, nem használható mozgás közben. Fékezéshez húzza a kart az első kerekek felé, a fék kioldásához pedig az ellenkező irányba.
- 10 fokosnál nagyobb lejtőn ne használja
- ejtős területen lassan közlekedjen
- egy ember szállítására alkalmas csak
- tartsa a lábát a lábtartón mozgás közben. Soha ne álljon fel a lábtartóra
- ne használja liftben
- ne tolasson vele lejtőn
- a kerekesszékes személy soha ne hajoljon ki a kerekesszékből, a súlypontnak a kerekesszékekben kell lenni
- csak azokat a tárgyakat próbálja elérni, ami karnyújtásra vannak
- kiemelten óvatosan közelítsen meg balesetveszélyes helyeket: ajtószűkület, lépcső, háztartási eszközök, gyerekjátékok...
- konzultáljon orvosával, hogy a kerekesszékből való kiszállás és beszállást milyen módon javasolja
- a féket lassításra soha ne használja csak fékezésre

Technikai adatok:

Méretek: 51x84x102 cm

Ülőlap: 48x40 cm

Ülőlap magassága: 48 cm

Összecsukott szélesség: 20 cm

Súly: 9 kg

Terhelhetőség: 115 kg

Gyakori kérdések:

Milyen helyzetekre javasoljuk a kerekesszék használatát?

Alkalmi használatra javasolt. Főként beltéri és időszakos kültéri használatra. Tipikus körülmények: bevásárlás, utazás, kirándulás...

Szükséges a gumikat felfújni?

Mivel a kerekesszéken tömör kerekek vannak, ezek felfújása szükségtelen.

Karbantartási tanácsok:

Rendszeres karbantartás szükséges ahhoz, hogy a termék mindig megfelelően működjön. Mindig bizonyosodjon meg, hogy a kerekesszéke megfelelő állapotban van-e.

1. Hetente egyszer általános tisztítószerrel törölje le a vázat. Amennyiben a szék szennyeződik, haladéktalanul tisztítsa meg. Autó vaxxal havonta egyszer tisztítsa meg a fém alkatrészeket.
2. A kárpitot szappanos tisztítószerrel tisztítsa. Sérült, szakadt kárpitot azonnal ki kell cserélni.

1. Havonta egyszer ellenőrizze a kerekeket. Laza tengely, vagy csavarok esetén szorítsa meg a kötéseket.
2. A tömör kerekeket havonta egyszer törölje le nedves ruhával. Sérült gumit ki kell cserélni.

Garancia:

Garancia idő 12 hónap. Nem vonatkozik a gumik és a kárpit, fékek elhasználódására. Anyaghiba, vagy szerkezeti hiba esetén alkatrész javítás, vagy termék csere lehetséges.

Garancia: 12 hónap.

Forgalmazó: _____ -

Eladás kelte: _____

Orvostechnikai gyógyászati segédeszköz, amely megfelel a/2009. (III. 17.) EüM rendeletnek és CE minősítéssel rendelkezik.

Használatáról kérdezze meg kezelőorvosát.