



## Tusolószék higiéniai nyílással 10300 és Tusolószék higiéniai nyílással, háttámlával 10310 használati utasítás



**Használati cél:** A STANDARD zuhanyszék egy ülő- és felállási segédeszközként terveztek emberek számára, akiknek az alsó végtagok stabilitása/funkciója korlátozott. A zuhanyszék higiénikus kivágással megkönnyítheti vagy lehetővé teszi a személyes higiéniát a zuhany alatt, de csak azok a személyek használhatják, akiknek megfelelő az egyensúly érzékük különben fennáll a leesés veszélye.

**Jelzés:** Korlátozott állóképesség, korlátozott stabilitás, általános gyengeség

**Ellenjavallat:** Szédülés, egyensúlyhiány, törzskontroll hiányában, zavart állapotban, elégtelen fizikai vagy szellemi képességek mellett nem használható.

**Termékleírás/verziók:** A zuhanyszék kényelmes és biztonságosabb testápolást biztosít a zuhanyzás közben. Alumíniumból és műanyagból készült, és öt különböző ülés magasságra állítható. Az ülés csúszásmentes felülettel van ellátva, a higiéniai kivágás megkönnyíti a személyi higiéniát és intim higiéniát. Különböző modellek léteznek (lásd a műszaki adatokat), a megfelelő szék kiválasztása szükséges szakemberrel közösen végezzük. A tesztelés, összeszerelés és használati utasítás csak

felhatalmazott, képzett szakemberek végezhetik. A tárgyat csak kísérő/gondozó segítségével szabad használni. A modell háztartási használatra készült, a modell csak ép, sértetlen bőrrel érintkezzen. Egy másik ill a fent említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű. Az eredményért A Sundo GmbH vagy a gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. A termékkel kapcsolatban minden súlyos esemény azonnali jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes forgalmazónak.

**Használat/karbantartás előtt:** Először is olvassa el teljesen ezt a használati útmutatót.

**Kérjük, ellenőrizze előtte** Első használatnál és minden használatnál, hogy a termék sértetlen-e. Győződjön meg arról is, hogy minden használat előtt biztonságosan áll a zuhanyszéknél rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket és az ülés stabilitását. Ha vannak jelei sérülések vagy kopás esetén a "Standard" zuhanyszéket (tovább) nem szabad használni. A biztonsági előírások betartása esetén nincs szükség karbantartásra.


**Szállítási tétel 10300:** 2 alumínium keret, 1 műanyagülés, 2 stabilizáló rúd, 5 hosszú csavar, 2 rövid csavar, 8 alátét, 1 anya

**Szállítási tétel 10310:** 2 alumínium keret, 1 műanyagülés, 2 L alakú tartó a háttámlához, 5 hosszú csavar, 6 rövid csavar, 12 alátét, 1 anya

Szükséges szerszámok: 1 csillagcsavarhúzó, 1 db villáskulcs méret. 10

**Összeszerelés:** Az elemet csak felhatalmazott, képzett szakemberek telepíthetik. Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.

1. Először állítsa be ugyanazt a magasságot minden alapon (=mind a 4 láb). Ehhez nyomja le teljesen a sárgaréz színű gombot (1 jelzés), a teleszkópos csövet a kívánt hosszban, és húzza ki ismét a gombot a kívánt magasságban kiengedni a fúrólyukból. Fontos, hogy a gomb teljesen be legyen zárva bepattan a helyére, azaz jól láthatóan és érezhetően kijön a furatból.

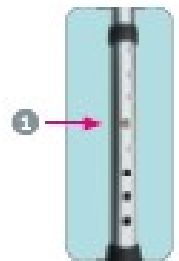


2. Ezután helyezze mindkét alapot a keskeny oldalával egymáshoz, és csatlakoztassa őket alátéttel, egy hosszú csavar (2 jelzés), egy másodperc az alátétet és az anyát a kijelölt helyeken középen fúrt lyukak. Húzzon mindent gondosan. Forgassa el a műanyagülést alsó oldalával felfelé, és fektesse le elkészült segédkeretet a kijelölt helyre mélyedéseket. (lásd az illusztrációt)



3. Most az alap 2 rövid csavarral (3 jelzés) becsavarható és egy-egy alátétet erősen az üléshez becsavarják.



4. A további összeszerelés a tiédőtől függ kiválasztott verzió: A 10 300. tétel esetében a két stabilizáló rúd, a 10 310 tételnél a két L-alakú konzol a 2. sz. Az ábrán a fennmaradó 4 hosszú csavar (4 jelzés) és mindegyik egy alátét az alapon keresztül csavarja szorosan az üléshez. A 10 300-as zuhanyszék összeszerelése ezzel befejeződik. A 10 310. cikkhez a háttámla a többivel együtt 4 rövid csavar és egy-egy alátét a rajta rögzítő konzolok. Húzza meg újra az összes csavart. Miután megvizsgálta a csavaros csatlakozások és a biztos lábavat a zuhanyszék használatra kész.

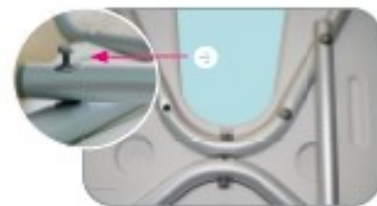

#### Műszaki adatok:

<b>Anyaga</b>	Alumínium, műanyag,	<b>Súly</b>	10300: 2,05 kg 10310: 2,65 kg
<b>Ülés:</b>	ca. 40 x 37 cm ca. 46 x 41 cm	<b>Teherbírása</b>	110 kg
<b>Magassága</b>	ötször állítható 44-53 cm	<b>Élettartama</b>	kb. 5 év, a használat gyakoriságától függően és törődést

#### Tisztítás/fertőtlenítés:

- ▶ A látható szennyeződések nedves ruhával és megfelelő, enyhe tisztítószerrel távolítsa el a kiszáradás megelőzése érdekében.
- ▶ Igény esetén a zuhanyszék szabványos, klórmentes eszközfertőtlenítők a törlőfertőtlenítési folyamatban. Fontos: kérjük, vegye figyelembe a gyártó használati utasítását.

#### Biztonsági utasítások:

- ▶ A zuhanyszéket csak a fent leírt célra szabad ülni használni, ne állj az ülésre!
- ▶ A zuhanyszéket csak segítséggel és sértetlen bőrrel engedje érintkezni, használj gondozót!
- ▶ A zuhanyszéket nem szabad használni, ha a felhasználó egyensúlyát ülni nem bírja tartani, leesés veszélyes!
- ▶ Vegye figyelembe a 110 kg-os maximális terhelést
- ▶ Minden lábat azonos magasságba kell állítani, különben fennáll a leesés veszélye!
- ▶ Ne használjon zsíros vagy olajos testápoló és tisztítószer, Csúszás és leesés veszélye!
- ▶ 10-40 °C hőmérséklet-tartományban használja, szaunában ne használja!
- ▶ Ha a zuhanyszék egyes részei meggörbültek, deformálódtak vagy megsérültek, távolítsa el azokat használni!
- ▶ Az optimális biztonság érdekében tanácsos rendszeresen lezárni a gumisapkákat ellenőrizni és szükség esetén cserélni. újrafelhasználás A zuhanyszéket megfelelő karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés után kell elvégezni Speciális kereskedelem alapvetően újrafelhasználható. Javítás csak a használatával végezhető eredeti alkatrészeket szállítanak.

**Garancia:** A törvényes garanciális igényeknek megfelelően.

Ki vannak zárva a garanciából! Nem rendeltetésszerű használatból, normál kopásból és meghibásodásból eredő károk csak elhanyagolható mértékben befolyásolják az eszköz értékét vagy használhatóságát. A műszaki változtatások, átalakítások és kiegészítések, valamint a nem megfelelő karbantartási munkák a garancia és általános termékfelelősség megszűnése. Fenntartjuk a jogot a műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokra.

---

 Sundo Homecare GmbH,  
Bahnhofstraße 13, DE-30916 Isernhagen, [www.sundo-homecare.de](http://www.sundo-homecare.de)

 Valentine International Ltd., 8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road,  
221 Hsichih District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.

  Y. Sung Handelsvertretung, Duesselthaler Str. 24, DE-40211 Duesseldorf





W08A18E1-0231

---